




**Professzionális SMART mérleg testelemző
funkcióval + mobil alkalmazás, Bluetooth és LED
kijelző**

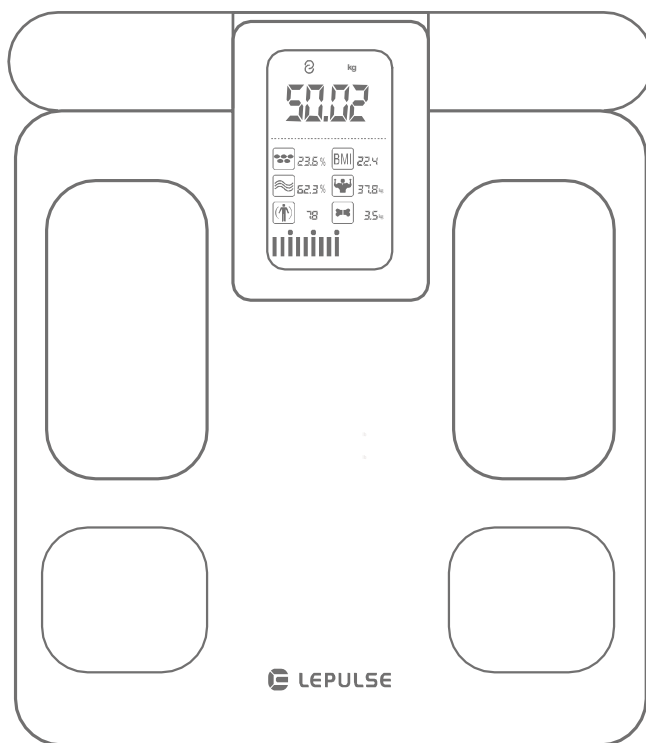

Kézikönyv


FIGYELMEZTETÉS

- NE HASZNÁLJA a mérleget, ha beültetett orvosi eszközei vannak, például pacemakere.
- NE álljon a mérleg szélére, és NE ugorjon rá.
- NE terhelje túl a súlyt (maximális terhelés 180 kg/396 lb/28 st).
- NE ejtsen vagy dobjon tárgyakat a mérlegre, mert ez károsíthatja az érzékelőket.
- NE merítse vízbe a mérleget, és NE használjon vegyi tisztítószeret. Enyhén nedves ruhával tisztítsa meg a mérleget.
- Az ezzel a készülékkel végzett mérések csak tájékoztató jellegűek, és nem tekinthetők orvosi véleményeknek.
- NE használja semmilyen egészségügyi állapot diagnosztizálására vagy kezelésére. Mielőtt megváltoztatná étrendjét, edzéstervét vagy fizikai tevékenységét, konzultáljon háziorvosával.
- Mérés előtt mindig helyezze a mérleget kemény, száraz és vízszintes felületre.
- Győződjön meg arról, hogy a lába száraz, mielőtt a mérlegre lép.
- NE használja a készüléket, ha az sérült. A sérült berendezés további használata sérülést vagy hibás eredményeket okozhat.
- Minden használat előtt ellenőrizze a készüléket.
- Legyen óvatos, ha nedves és csúszós felületen használja.
- 16 éven aluliak esetében a mérleg csak a testsúly mérésére alkalmas.

TERMÉKLEÍRÁS

Termék méret:	310x355x50mm
LED kijelző:	68x109mm
Súly mértékegysége:	kg
Súlykorlát:	5kg-180kg
Súlyeloszlás:	0.2lb/0.1kg
Forrás:	300mAh lítium akkumulátor
Üzemi hőmérséklet:	10-40°C
Működési páratartalom:	40%-80% RH

TERMÉK ÁTTEKINTÉS

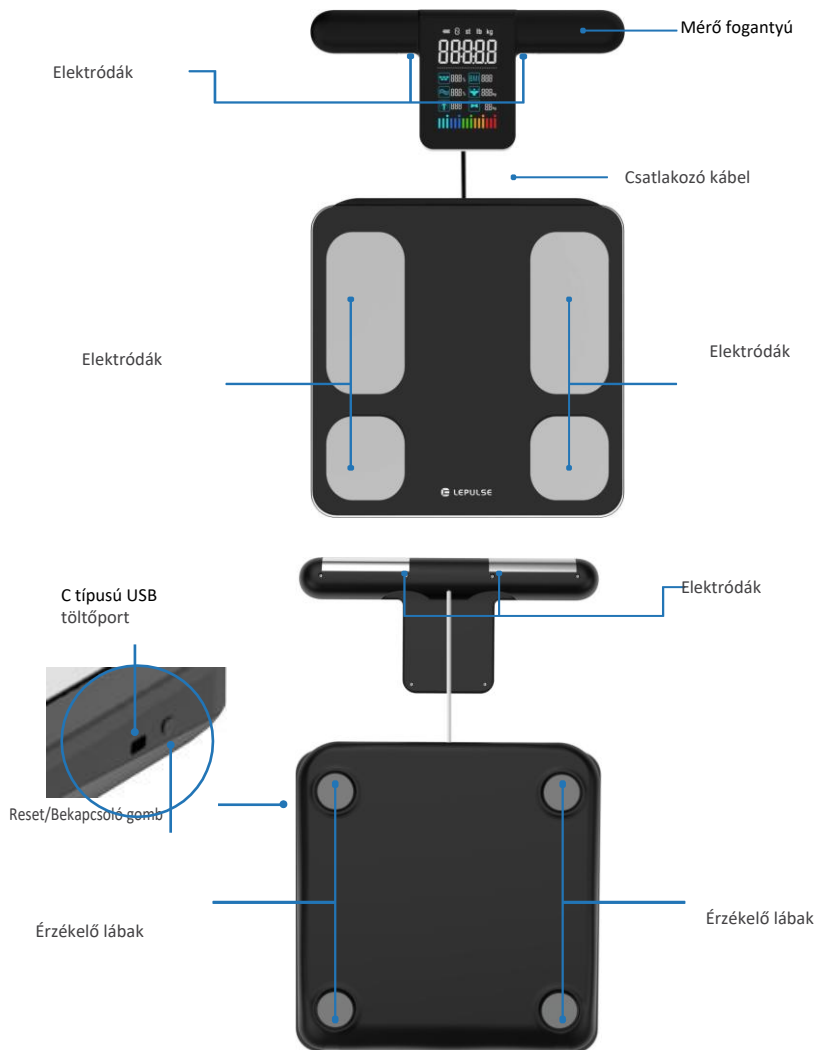

KIJELZŐ KÉPERNYŐ



Megjegyzés: A kézikönyvben látható képek csak illusztrációk. A részletekért tekintse meg a tényleges terméket.

BMI TÁBLÁZAT

BMI (férfiak és nők számára egyaránt alkalmas)					
Kor	Alacsony súlyú	Egészséges súly	Túlsúly	Elhízottság	Súlyos elhízás
18-100	<18.5	18.5-23.9	24-27.9	28-34.9	≥35


Testtömegindex (BMI) = súly (kg) ÷ magasság² (m)

Például: BMI = 70 kg ÷ (1,75 m * 1,75 m) = 22,86 egészséges súlytartományon belül
Megjegyzés: A BMI egy általánosan használt szabvány a testsúly és az egészség mérésére.

BEKAPCSOLÁS

Első használat

Nyomja meg a reset/bekapcsoló gombot, vagy töltsse fel a mérleget a szállítási mód törléséhez és a mérleg bekapcsolásához.

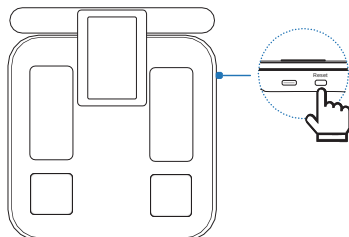

További felhasználásra



Nyomja meg a gombot a testösszetétel skála felébresztéséhez. A nyomásnak nagyobbnak kell lennie, mint a minimális skálatartomány (5 kg).

Töltsse le és telepítse az alkalmazást

- 1 A ViHealth alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez keresse meg a ViHealth terméket az App Store vagy a Google Play áruházban, vagy olvassa be az alábbi QR-kódot.




- 2 Regisztráljon egy alkalmazásfiókot: Adja meg e-mail címét és jelszavát, válassza ki országát vagy régióját, majd válassza ki.
Megjegyzés: Az iOS erős jelszó-létrehozási funkciója jelenleg nem támogatott.

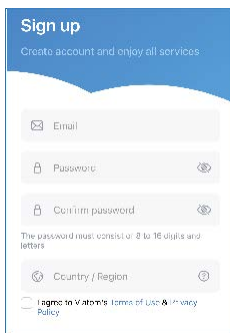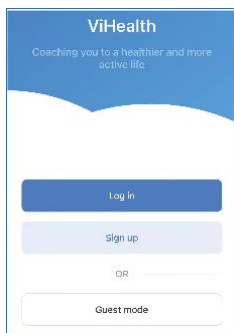

3

Adja meg a személyes adatokat, beleértve a nemet, a nevet, a születési dátumot, a magasságot és a súlyt. A mentéshez érintse meg a [Kész] gombot.

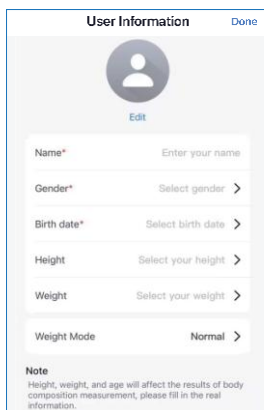


The 'User Information' form features a 'Done' button in the top right corner. Below the title is a circular profile icon with an 'Edit' link underneath it. The form contains several input fields: 'Name*' with a placeholder 'Enter your name', 'Gender*' with a 'Select gender >' dropdown, 'Birth date*' with a 'Select birth date >' dropdown, 'Height' with a 'Select your height >' dropdown, 'Weight' with a 'Select your weight >' dropdown, and 'Weight Mode' with a 'Normal >' dropdown. A 'Note' section at the bottom states: 'Height, weight, and age will affect the results of body composition measurement, please fill in the real information.'

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy minden személyes adat helyes, mivel az életkor, a magasság és a nem befolyásolja a mérési eredmények pontosságát..


4

Változtassa meg jelszavát.

Ha elfelejtette jelszavát, kérjük, térjen vissza a bejelentkezési oldalra, és válassza az [Elfelejtette a jelszavát?] lehetőséget. Ezután adja meg e-mail címét, érintse meg az [E-mail küldése] gombot, és állítsa vissza jelszavát az elküldött e-mailben található hivatkozás segítségével.

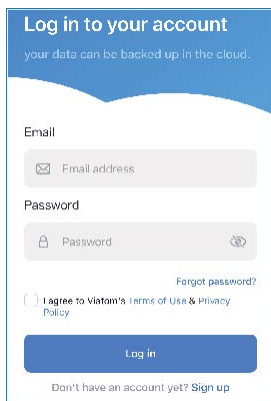

The 'Log in to your account' form has a blue header with the title and a sub-header 'your data can be backed up in the cloud.'. It includes an 'Email' section with an 'Email address' input field, a 'Password' section with a 'Password' input field and a 'Forgot password?' link, and a checkbox for 'I agree to Vistom's Terms of Use & Privacy Policy'. A 'Log in' button is at the bottom, with a link 'Don't have an account yet? Sign up' below it.

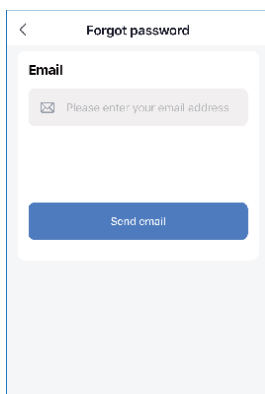



The 'Forgot password' form has a back arrow in the top left and a title 'Forgot password'. It features an 'Email' section with an input field 'Please enter your email address' and a 'Send email' button.

Első csatlakozás az alkalmazáshoz

Megjegyzés: Ha a mérleg képernyője be van kapcsolva, a mérleg Bluetooth-ja be van kapcsolva. Ha a képernyő ki van kapcsolva, a Bluetooth azonnal le van tiltva, és az alkalmazás nem találja az eszközt.

1 Kapcsolja be mobiltelefonja Bluetooth-át, és nyissa meg a ViHealth alkalmazást. Android esetén ezután engedélyeznie kell a helymeghatározást.


2 Lépjen be a [Profil] oldalra --> koppintson az [Eszköz hozzáadása] lehetőségre (vagy lépjen be az [Írányítópult] oldalra --> koppintson a mérleg ikonra a bal felső sarokban --> válassza az [Eszköz hozzáadása] lehetőséget. Finoman lépjen rá a mérlegre, hogy felébressze a képernyőt, és érintse meg a kívánt eszközmodellt az alkalmazásban. Most az eszköz sikeresen csatlakozik az alkalmazáshoz.

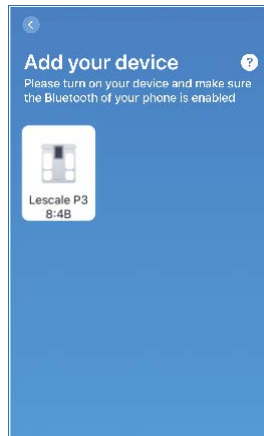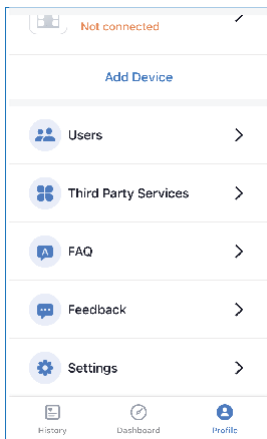

Indítsa el a mérést

- 1 Helyezze a mérleget szilárd, sima felületre. A szőnyegek vagy egyenetlen felületek befolyásolhatják a mérési eredmények pontosságát.
- 2 Kalibrálás: Óvatosan lépjen rá a mérlegre, hogy felébressze, és várja meg, amíg a mérleg "0.00"-t mutat, ami azt jelenti, hogy a kalibrálás befejeződött (ne felejtse el újra kalibrálni a mérleget, ha elmozdították).
- 3 Csatlakozás az alkalmazáshoz: Kapcsolja be a mobiltelefon Bluetooth-ját, és nyissa meg az alkalmazást. Nyissa meg a [Dashboard] oldalt. Óvatosan lépjen rá a mérlegre, hogy felébressze, és az irányítópult oldalának tetején a „Csatlakozva” felirat jelenik meg, jelezve, hogy az eszköz sikeresen csatlakozik az alkalmazáshoz.

Megjegyzés: Végezze el az első mérést csatlakoztatott alkalmazás mellett; és az ezt követő mérések offline módban is elvégezhetők anélkül, hogy csatlakoznának az alkalmazáshoz.

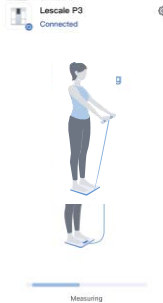

4 Helyes pozíció méréskor

- ✓ Lépjen fel a mérlegre két mezítláb. Győződjön meg arról, hogy a lábak teljesen érintkezzenek a négy fémelektórával, és nincs érintkezés a bal és a jobb alsó végtag között (beleértve a combot, a vádlit és a lábfejet is).




A lábai ne érjenek egymáshoz.



A lábainak nem szabad teljesen érintkezniük az elektrodákkal




Két kézzel fogja meg a fogantyút. Ügyeljen arra, hogy az ujjak egyenesen fedjék le a négy elektródát a fogantyún anélkül, hogy a kezek érintkeznének egymással.

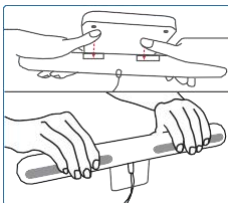

Ujjainak teljes mértékben érintkezniük kell az elektródákkal



A hüvelykujj ne érintse meg a képernyő szélét.

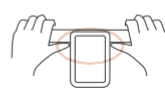

- ✓ Tartsa a karját egyenesen 30-45 fokos szögben.



- 5 Kérjük, vegye le cipőjét és zokniját, így a mérleg csak a súlyát tudja mérni.


Tartsa meg a fenti mérési pozíciót, amíg az összes adat meg nem jelenik a mérleg képernyőjén, vagy amíg az alkalmazás nem értesíti Önt, hogy a mérés befejeződött, mielőtt lelép a mérlegről.

Megjegyzés: ne szálljon le a mérlegről, amíg a mérés be nem fejeződött.



- 6 A mérleg körülbelül 15 másodperces megjelenítés után automatikusan kikapcsol.

- 7 A mérleg automatikus tekercselő tárcsával van felszerelve. Amikor a mérés befejeződött, kissé emelje meg a fogantyút, majd óvatosan helyezze vissza a mérlegre


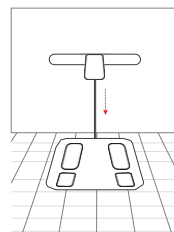


Részletes testösszetételi adatok megtekintése

A mérés befejezése után megjelenik a mért súlyérték, a szegmentális zsírelemzés és az izomegyensúly.


Görögessen le az összes testösszetételi elem méreteinek megtekintéséhez. Kiválaszthat egy konkrét mutatót a leírásához és elemzéséhez.

Érintse meg a [Jelentés] elemet a testösszetétel jelentés elemzéséhez és megosztásához.

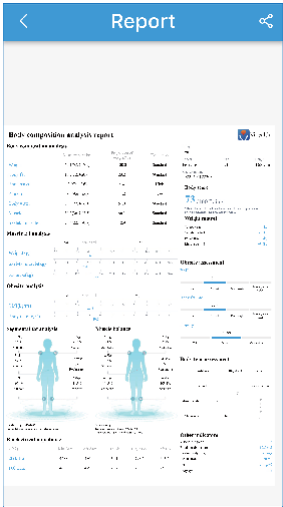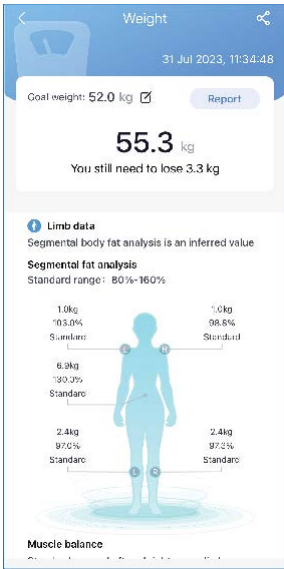



Trendgrafikon megjelenítése

Lépjen az [Előzmények] oldalra, és tekintse meg a heti/havi/évi trenddiagramot 15 fizikai mutatóból.

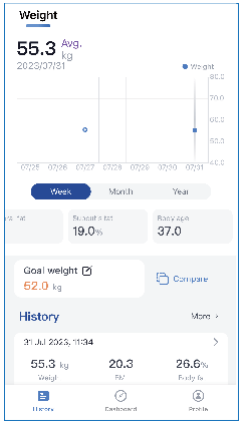


Méréstörténeti adatok megtekintése

Lépjen be az [Előzmények] oldalra --> érintse meg a [Tovább] gombot --> válassza ki a dátumtartományt hónapokban. Megjelenik a kiválasztott dátum teljes mérési előzménye. Érintse meg bármelyik mérést egy adott testösszetétel érték megtekintéséhez.

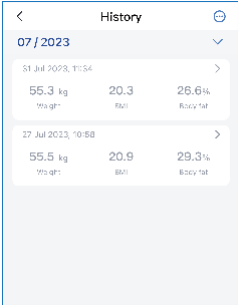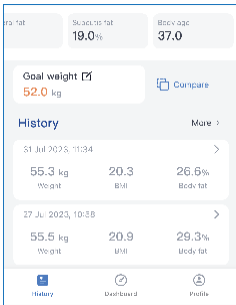



Előzmények törlése

Lépjen be a [Előzmények] – [Továbbiak] – válassza ki a törölni kívánt konkrét adatokat – húzza balra az újját (iOS) vagy nyomja meg hosszan (Android), majd koppintson a [Törlés] gombra.

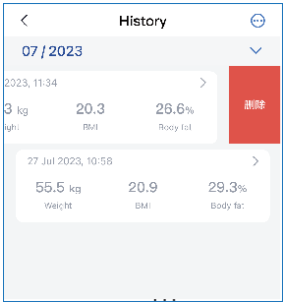

Hasonlítsa össze a mérési előzményeket



Lépjen be az [Előzmények] oldalra --> kattintson az [Összehasonlítás] elemre --> válasszon két rekordot --> érintse meg az [Összehasonlítás] gombot. Számos testösszetétel-elem variációja kerül bemutatásra.

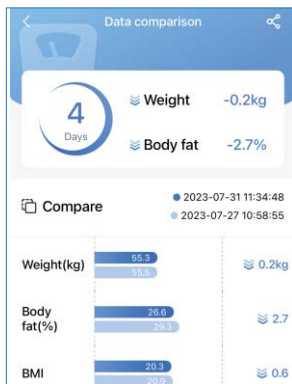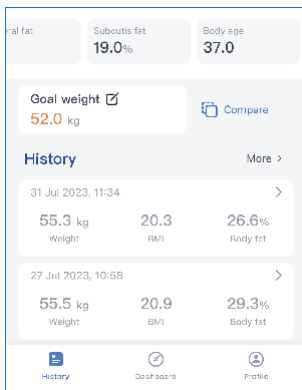

Adatok megosztása és exportálása




Ossza meg a mért adatok részleteit  a felső részben

Lépjen be az [Előzmények] oldalra --> válassza ki a megosztani kívánt rekordot --> kattintson a jobb sarkokra --> válassza a [Mentés] vagy a [Megosztás] lehetőséget.

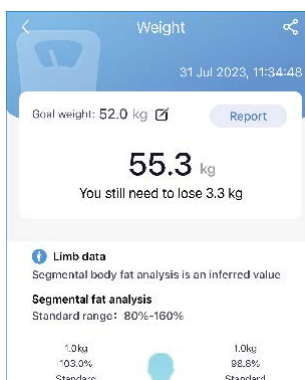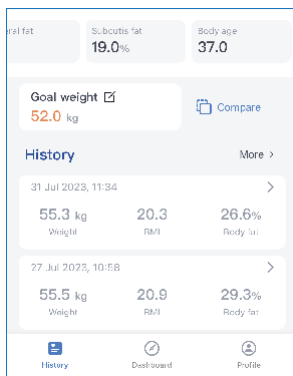




Ossza meg szakmai beszámolóját

Lépjén be az [Előzmények] oldalra --> válassza ki a megosztani kívánt rekordot --> válassza az [Üzenet] lehetőséget --> koppintson a jobb felső sarokban --> ossza meg a PDF fájlt szükség szerint.

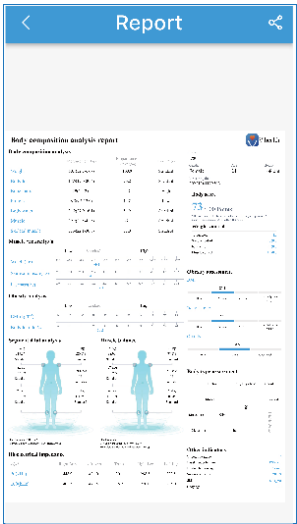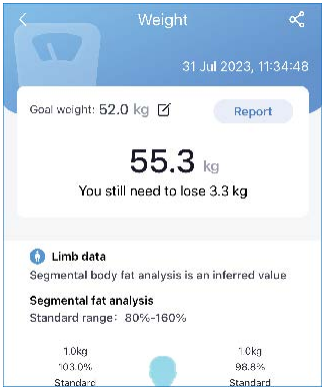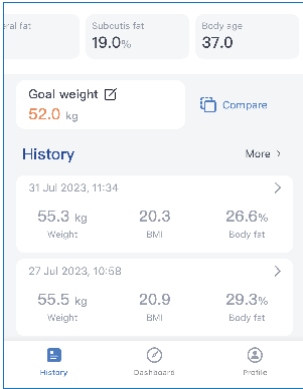

Kapcsolja át az egységeit




Amikor az eszköz csatlakozik az alkalmazáshoz, válassza a [Profil] --> [Beállítások] --> [Egység] --> [Súly] lehetőséget, és válassza ki a kívánt mértékegységet.

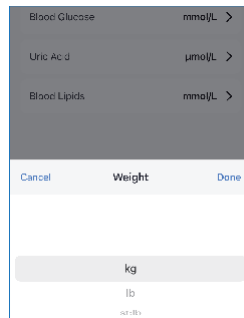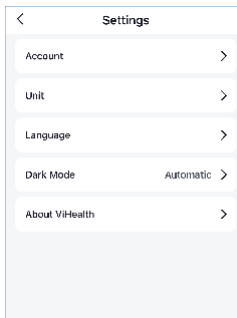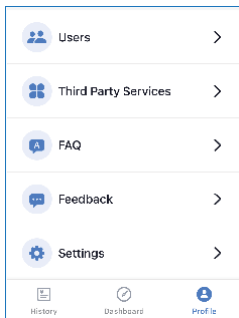


Megjegyzés: Ha az egységet az alkalmazásban változtatják meg, amikor az eszköz nincs csatlakoztatva, az eszköz egysége nem fog szinkronizálódni, amíg legközelebb sikeresen nem csatlakozik az alkalmazáshoz (azaz ha az eszköz le van választva az alkalmazásról, az eszköz egysége változatlan marad az alkalmazásban végzett bármilyen módosítás ellenére). Ezért javasolt az egységet az alkalmazásban csatlakoztatott eszközzel beállítani.

Felhasználó hozzáadása, váltása vagy eltávolítása

Felhasználó hozzáadása: Lépjen be a [Profil] oldalra --> válassza a [Felhasználók] lehetőséget --> érintse meg a [Felhasználó hozzáadása] gombot --> adja meg a felhasználói adatokat --> érintse meg a [Kész] gombot.

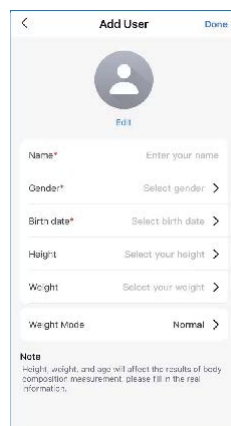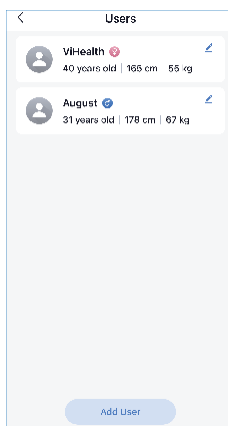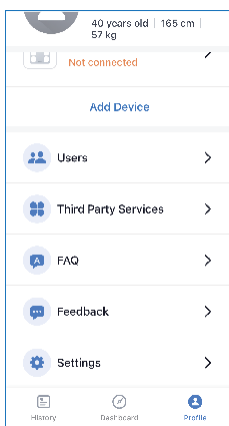


Felhasználóváltás: Lépjen be az [Eldozmények] oldalra --> koppintson az avatarra --> válassza ki a felhasználót.

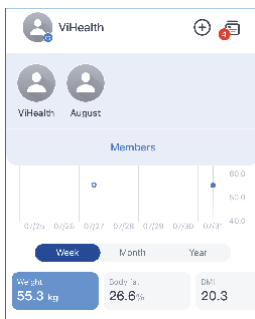


Megjegyzés: Minden új felhasználónak létre kell hoznia saját felhasználói profilt, és meg kell győződnie arról, hogy személyes adatai helyesek a mérések elvégzése előtt.

Felhasználó törlése: Lépjen be a [Profil] oldalra --> válassza a [Felhasználók] lehetőséget --> válasszon egy felhasználót --> csúsztassa az ujját balra (iOS) vagy nyomja meg hosszan (Android), majd koppintson a [Törlés] gombra.

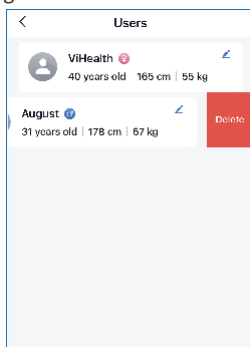

Gyermek mód

Lépjen be a [Profil] oldalra --> koppintson az avatarra --> koppintson a [Súlymód] elemre --> válassza a [Gyermek] lehetőséget --> Egyedül mérje meg a felnőttet --> Mérje meg a felnőttet és a gyermeket együtt --> Eredmények megtekintése az APP alkalmazásban.

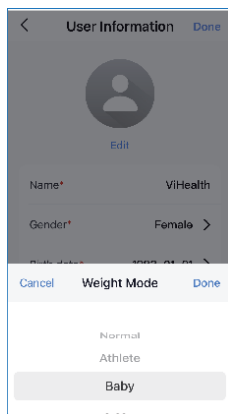

Offline mérés

Az off-line mérés előfeltételei


- 1 Az offline mérés előfeltételei A felhasználó az alkalmazásban a megfelelő személyes adatokat hozta létre, és a mérést úgy végezte el, hogy az alkalmazás csatlakoztatva van, pl. j. A felhasználói információkat az alkalmazáson keresztül küldik el, és a mérlegben tárolják.
- 2 A mérleg képes érzékelni a felhasználót, amihez a felhasználó súlyának ± 2 kg-on belül kell lennie. Ha a mért súlyváltozás nagyobb, mint ± 2 kg, csatlakoztassa a mérési alkalmazáshoz.

Offline mérés több felhasználó számára

Mérlegfeltételek a felhasználók megkülönböztetéséhez: A felhasználók közötti súlykülönbség nagyobb, mint ± 2 kg, i.e. ha két vagy több felhasználó súlykülönbsége ± 2 kg-on belül van, a mérleg nem képes megkülönböztetni a felhasználókat. Ebben az esetben ajánlatos a mérőalkalmazáshoz csatlakozni.

Adatok offline feltöltése az alkalmazásba

- 1 A mérleg képes tárolni a felhasználói adatokat (24)
- 2 A régi adatok nem töltődnek fel automatikusan az alkalmazásba, amint az eszköz csatlakozik az alkalmazáshoz. A felhasználónak mérést kell végeznie csatlakoztatott alkalmazás mellett, és a régi adatok a legfrissebb mérési adatokkal együtt átkerülnek az alkalmazásba.
- 3 Ha több felhasználó van, a mérleg a súlykülönbségnek megfelelően (± 2 kg) automatikusan egyezteteti az előzményadatokat az alkalmazásban lévő felhasználókkal, és elküldi az azonosítatlan adatokat az adategyeztető központnak. Az adatok kézi letöltéséhez vagy törléséhez érintse meg a jelentés ikont az [Előzmények] oldalon.

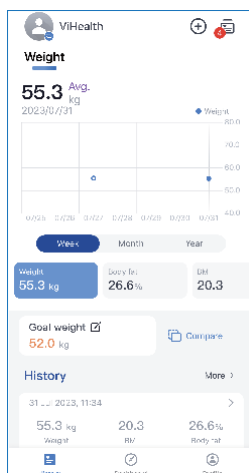



The screenshot shows the 'Data Attribution' screen with a 'Select All' button at the top right. It displays a list of weight measurements, each with a radio button for selection. The data is as follows:

Weight	Date and Time
Weight 55.3 kg	31 Jul 2023, 11:34:11
Weight 57.2 kg	18 Apr 2023, 17:11:31
Weight 57.8 kg	18 Apr 2023, 17:11:19
Weight 58.1 kg	18 Apr 2023, 17:02:47

At the bottom, there are icons for 'Adapt' and 'Delete'.


Egyéb beállítások

Lépjen be a [Profil] oldalra, megtekintheti a [GYIK]-et, üzenetet hagyhat segítségért a [Visszajelzés] részben, és beállíthatja a nyelvet vagy a sötét módot a [Beállítások] menüpontban.

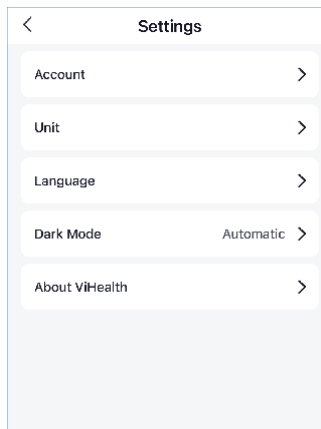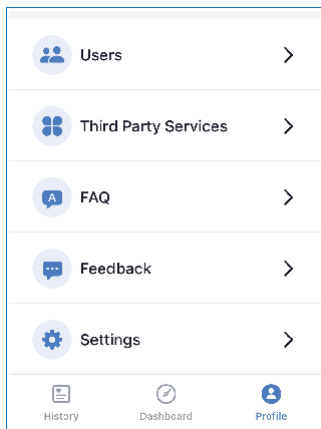

Kézi rögzítés

Lépjen be az [Előzmények] oldalra --> érintse meg a + gombot a jobb felső sarokban --> válassza ki a dátumot, időt és súlyt --> érintse meg a [Mentés] gombot.

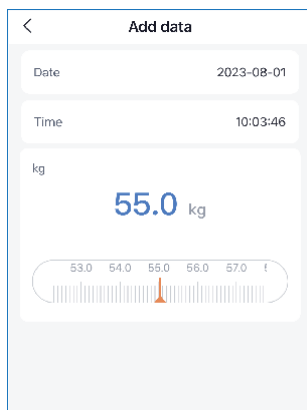

Adatszinkronizálás harmadik féltől származó alkalmazásokkal


A ViHealth támogatja az adatok szinkronizálását két alkalmazás – Apple Health, Fitbit és Google Fit – között. A szinkronizált adatelemek a következők:

	Weight	BMI	Body fat	Lean body mass	Heart rate
Apple Health	Y	Y	Y	Y	Y
Fitbit	Y	Y	Y	N	N
Google Fit	Y	N	Y	N	Y


Megjegyzés: A funkció csak a fiók elsődleges felhasználója számára elérhető.

Apple Health


Adatszinkronizálás

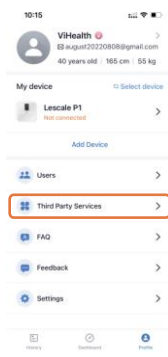

Vyberte [Služby třetích stran]

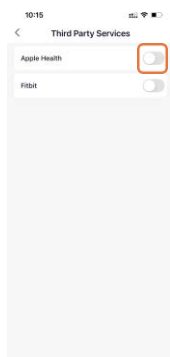

Zapnite Apple Health

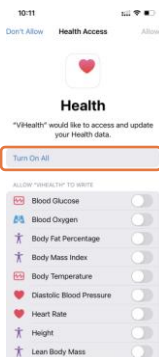


Vyberte [Zapnutí všeho]




Vyberte [Povolit]

Adatok megtekintése


- 1 Az [Összegzés] részben megtekintheti az egészségügyi adatokat, és beállíthatja, hogy mely elemek jelenjenek meg.

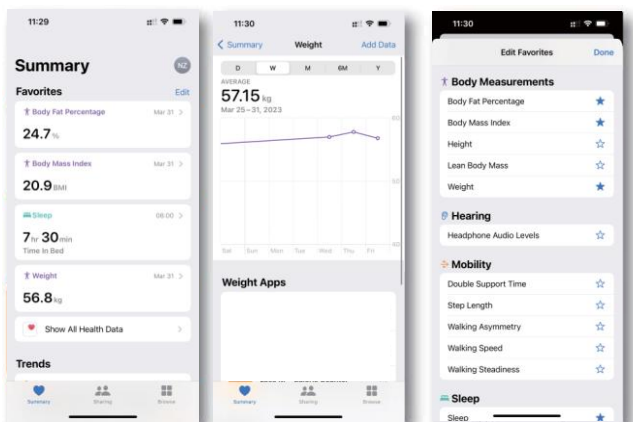


- 2 A [Megosztás] részben érintse meg az [Alkalmazások] gombot. A szinkronizált ViHealth adatok megtekintéséhez válassza a [ViHealth] lehetőséget.

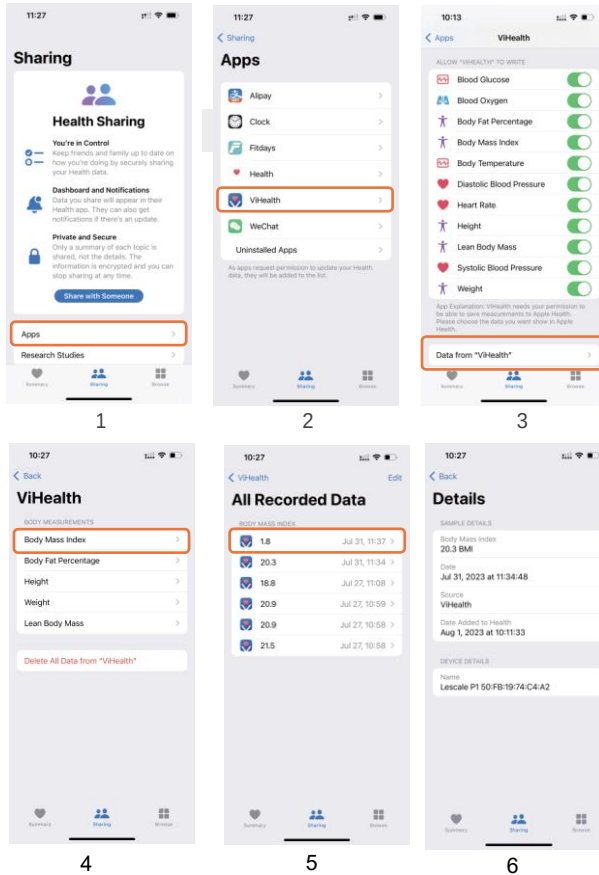


- 3 A [Tallózás] menüpontban megtekintheti az egészségügyi adatokat egészségügyi elemek szerint.

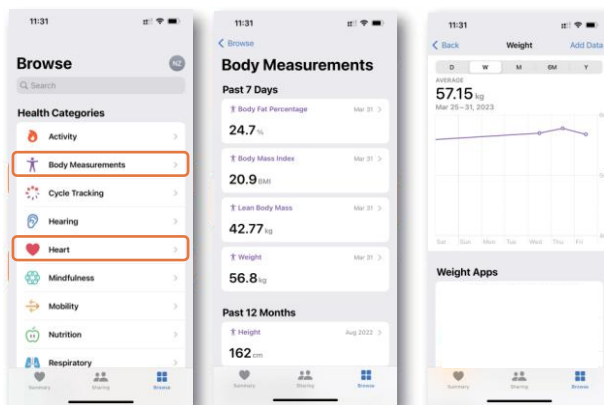

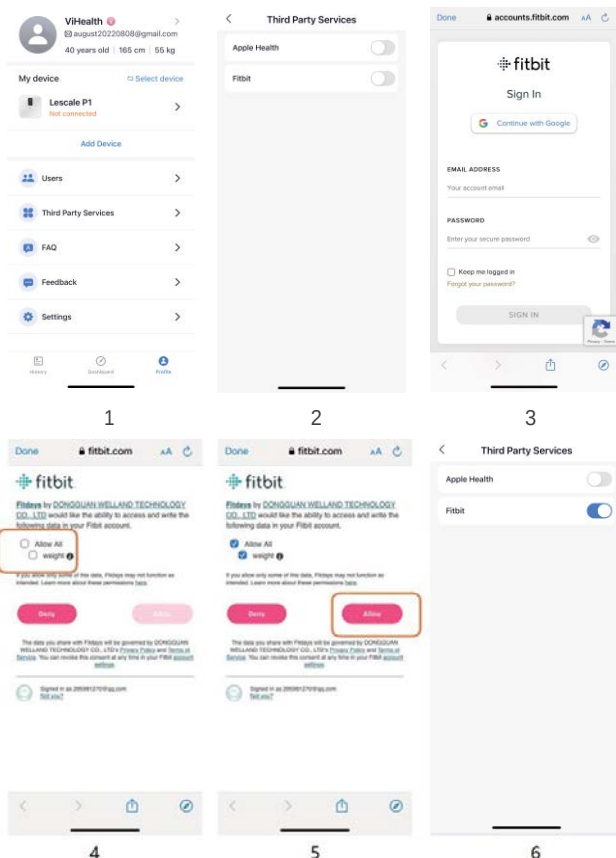

Adatok megtekintése

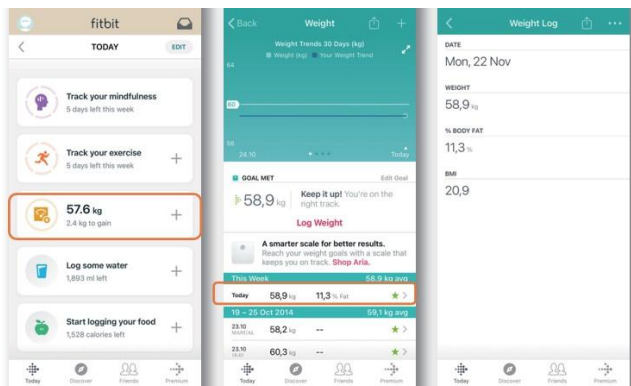


A beállítás befejezése után a ViHealthben lévő adatok szinkronizálódnak a Fitbittel. Megjegyzés: Ha a Fitbit nem tud adatokat fogadni, győződjön meg arról, hogy a szinkronizálni kívánt Fitbit-fiók megegyezik az éppen megtekintett Fitbit-fiókkal.


Google Fit

Adatszinkronizálás

A Google Fithez aktiválásához kövesse a ViHealth alkalmazás képernyőn megjelenő utasításait.

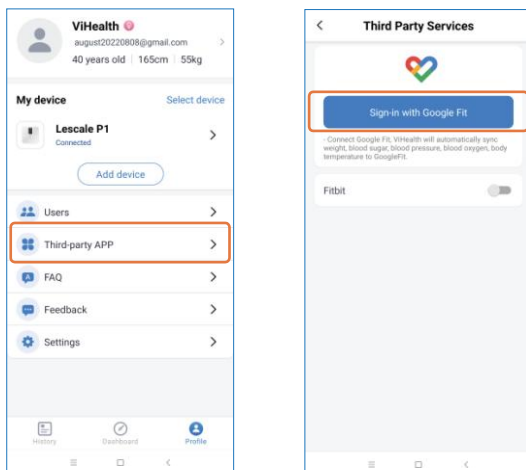

Adatok megtekintése

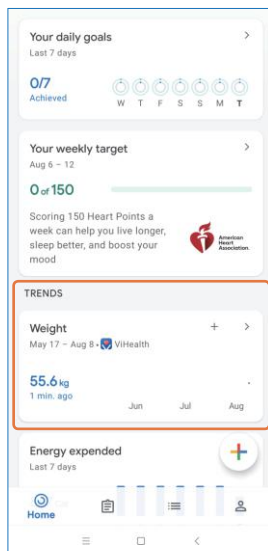

A beállítás befejezése után a ViHealth alkalmazásban mért adatok szinkronizálva lesznek a Google Fit alkalmazással

HIBAELHÁRÍTÁS



Az akkumulátor gyenge.
Csatlakoztassa az USB-t a töltéshez.



A mérleg túlterhelt.
Több mint 180 kg van a mérlegen.



Az érzékelő rosszul van nullázva. Helyezze a készüléket szilárd, sima felületre.



Az érzékelő nem állítható vissza. Cserélje ki az érzékelőt.

Pontossági problémák

Problémaíráás	Lehetséges okok	Megoldás
Pontatlan súlyérték.	A készüléket nem helyezik sík padlóra, és nem használják szőnyegen.	Helyezze a készüléket szilárd, sima felületre.
	A készülék nincs kalibrálva az első használatkor vagy az áthelyezés után.	A készülék első használatakor vagy áthelyezése után mérés előtt kalibrálja azt. Helyezze a készüléket egy szilárd, sima felületre, óvatosan lépjen rá, hogy aktiválja, és várja meg, amíg a képernyőn „0.00” jelenik meg, mielőtt a skálán mér..
	Egyenetlen álló helyzet, túl messze balra/jobbra/elöl/hátul.	Méréskor tartsa stabilan a súlypontot a skála közepén, és ügyeljen arra, hogy a bal és a jobb alsó végtag ne érintkezzen (beleértve a combot, a vádlit és a lábfejet).
	A készülék sérült. Nem mér, vagy a szám véletlenszerűen ugrik mérlegelés után.	Cserélje ki a készüléket.
	Tekintse meg a pontatlan súlyérték okait.	A pontatlan súlyértéket megtalálhatja a megoldásokban.

Nem folyamatos mérési eredmények / több mérés túlzott eltérése.	A mérési idő a normál emberi anyagcsere miatt körülbelül 1,5 kg-os különbséget okozhat a reggeli és esti testsúlyban, az anyagcsere pedig befolyásolhatja a víz ingadozását és az elektromos impedanciát.	Minden nap ugyanabban az időben mérjen, hogy minimalizálja a természet törvényei által okozott eltéréseket. Felkelés után vagy lefekvés előtt ajánlatos mérést végezni.
	A testadatok nagy ingadozása megerőltető edzés vagy túlevés miatt.	Ne mérjen közvetlenül megerőltető edzés vagy túlevés után.
	A mérési pozíció változásai.	Mérés közben próbálja megtartani a helyes pozíciót. Lépjen fel a mérlegre két mezítláb. Győződjön meg arról, hogy a lábak teljesen érintkeznek a négy fémelektrodával. Győződjön meg arról, hogy nincs érintkezés a bal és a jobb alsó láb között (beleértve a combot, a vádlit és a lábfejet). Két kézzel fogja meg a fogantyút. Ügyeljen arra, hogy az ujjak egyenletesen fedjék le a négy elektródát a fogantyún anélkül, hogy a kezek érintkeznének egymással. Tartsa a kezét egyenesen 30-45 fokos szögben. Ügyeljen arra, hogy a keze ne legyen túl közel a testéhez.
Pontatlan testösszetételi adatok.	Hibás mérési pozíció.	Győződjön meg arról, hogy a mérési pozíció minden mérésnél megfelelő. Lépjen fel a mérlegre két mezítláb. Győződjön meg arról, hogy a lábak teljesen érintkeznek a négy fémelektrodával. Győződjön meg arról, hogy nincs érintkezés a bal és a jobb alsó láb között (beleértve a combot, a vádlit és a lábfejet). Két kézzel fogja meg a fogantyút. Ügyeljen arra, hogy az ujjak egyenletesen fedjék le a négy elektródát a fogantyún anélkül, hogy a kezek érintkeznének egymással. Tartsa a kezét egyenesen 30-45 fokos szögben. Ügyeljen arra, hogy a keze ne legyen túl közel a testéhez.

	Helytelen személyes adatok (kor/magasság/nem).	A felhasználó testösszetételi adatainak számítása tartalmazza a felhasználó korát, nemét és magasságát. Kérjük, adja meg a helyes életkort, nemet és magasságot a mérési eredmények pontosságának biztosítása érdekében.
--	--	--

Mérési problémák

Probléma leírás	Lehetséges okok	Megoldás
Csak a súlyérték, más adat nem	A felhasználó a mérést cipőben vagy zokniban végzi, vagy a termék csomagolását nem távolítja el	A felhasználónak mezítláb kell mérlegelnie. Győződjön meg arról, hogy a lábak teljesen érintkeznek a négy elektródalappal/ fém elektródával, és nincs érintkezés a bal és a jobb alsó láb között (beleértve a combot, a vádli és a térdet).
	A felhasználó a mérés befejezése előtt lelép a mérlegről.	A felhasználó a mérési pozíciót, amíg az összes mérés meg nem jelenik a mérleg képernyőjén, vagy amíg az alkalmazás fel nem kéri a mérés befejezésére, amíg le nem száll a mérlegről.
	Nincsenek felhasználói adatok a skála végén.	Minden új felhasználónak létre kell hoznia egy felhasználói profilt az alkalmazásban, és meg kell adnia a megfelelő személyes adatokat. Az első mérést az alkalmazáshoz csatlakoztatott eszközzel kell elvégezni, hogy a felhasználó adatai átvihetők legyenek a mérlegre, a későbbi mérések pedig offline módon, az alkalmazáshoz való csatlakozás nélkül is elvégezhetők.
	Helytelen személyes adat (magasság/életkor/nem)	A hibás személyes adatok általában fiatal korra vonatkoznak (<16 év) vagy abnormális magasság, amely kívül esik a skála mérési tartományán. Ebben az esetben a testzsírt nem mérik. Ellenőrizze, hogy a felhasználó alapvető információi helyesek-e.
	A felhasználó 16 éven aluli.	Ha a felhasználó 16 év alatti, csak a súlyt mérik.

A régebbi testösszetételi adatok hirtelen eltűnnek	A felhasználó súlya túlságosan változó (több mint ± 2 kg) ahhoz, hogy a mérleg érzékelje.	Felhasználói megkülönböztetési feltételek offline mérésnél: A felhasználó súlya ± 2 kg-on belül változik, ellenkező esetben a felhasználónak csatlakoznia kell a mérőalkalmazáshoz (Ha a mérleg nem ismeri fel a felhasználót, akkor csak a súlyérték jelenik meg a mérleg képernyőjén, és "--" egyéb tételeknél testösszetétel).
	Két vagy több felhasználó súlyértékei olyan közel vannak (a különbség kisebb, mint ± 2 kg), hogy a mérleg nem tudja megkülönböztetni.	Több felhasználó megkülönböztetésének feltételei a mérlegen offline mérésnél: A felhasználók közötti súlykülönbség nagyobb, mint ± 2 kg, i.e. ha két vagy több felhasználó súlykülönbsége ± 2 kg-on belül van, a mérleg nem tudja megkülönböztetni a felhasználókat. Ebben az esetben javasolt egy mérőalkalmazáshoz csatlakozni (Ha a mérleg nem tud különbséget tenni a felhasználók között, a mérleg képernyőjén csak a súlyérték és a „--” jelenik meg a többi testösszetételi elemnél).

Csatlakozási problémák

Probléma leírás	Lehetséges okok	Megoldás
Bluetooth kapcsolat sikertelen	A Bluetooth funkció nincs aktiválva a mobiltelefonon.	iPhone-ok esetén manuálisan kapcsolja be a Bluetooth-t. Android telefonok esetén érintse meg az [Engedélyezés] gombot, amikor a rendszer kéri.
	Mobil Bluetooth jogosulatlan.	iPhone esetén érintse meg a [Bluetooth] elemet az [Adatvédelem és biztonság] részben, és kapcsolja be a Bluetooth engedélyezését a <u>ViHealth</u> számára.
	A GPS nincs aktiválva Android telefonján.	A Bluetooth 4.X lokalizációs funkciót biztosít. Az Android 6.0 és az iOS 10.0 és újabb verziók kezelhetik és engedélyezhetik a Bluetooth 4.X eszközt helymeghatározó eszközként, például GPS-ként. Ha egy alkalmazásnak Bluetooth-eszközt kell keresnie, engedélyt kér a helyünkről. Mivel a testösszetétel mérleg Bluetooth-on keresztül továbbítja az adatokat, a GPS-t engedélyezni kell Android 6.0 és iOS 10.0 és újabb rendszereken.

	Az alkalmazásnak tilos a hálózat használata.	Győződjön meg arról, hogy engedélyezte az alkalmazás számára a mobilhálózat vagy a WiFi használatát a későbbi párosításhoz és használathoz. Ennek az az oka, hogy az adatok felhőben való tárolásához kapcsolat szükséges egy szerverrel.
	A Bluetooth nem aktiválódik a mérleg végén	Ha a mérleg képernyője be van kapcsolva, a mérleg Bluetooth-ját aktiválódik. Ha a képernyő ki van kapcsolva, a Bluetooth azonnal le van tiltva, és az alkalmazás nem találja az eszközt. Csatlakozás közben győződjön meg arról, hogy a képernyő be van kapcsolva.
Az adatátvitel nem sikerült	Miután az eszközt csatlakoztatta az alkalmazáshoz, az online mérés nem fejeződik be.	A felhasználónak mérést kell végeznie az alkalmazás csatlakoztatásával, és az adatelőzmények a legfrissebb mérési adatokkal együtt átkerülnek az alkalmazásba. (Az adatelőzmények az online mérés befejezéséig nem kerülnek feltöltésre.)
	A készüléket több mobiltelefonhoz csatlakoztatták, de az adatok csak az éppen csatlakoztatott mobiltelefonra kerülnek átvitelre.	Ha több felhasználó különböző mobiltelefonokat használ ugyanahhoz a mérleghez való csatlakozáshoz, a mérleg feltölti az összes adatelőzményt az éppen csatlakoztatott mobiltelefonra, majd törli az előzményeket (például A és B a saját mobiltelefonját használja az alkalmazás regisztrálásához és csatlakoztatása, ha a mérleg 10 offline mérési rekordot tartalmaz A és B telefonhoz, akkor mind a 20 offline mérési rekord feltöltődik az A alkalmazásba, és a B telefon nem kapja meg őket, amikor újracsatlakozik a mérleghez).

Egységgel kapcsolatos problémák

Probléma leírás	Lehetséges okok	Megoldás
Az egység nem kapcsolható	A felhasználó nem tudja, hogyan kell átkapcsolni a készüléket.	A készülék váltása az alkalmazással: Amikor a készülék az alkalmazáshoz csatlakozik, válassza ki a [Profil] --> [Settings] --> [Unit] menüpontot, és válassza ki a kívánt egységet.
Az eszközön lévő egység KG marad, ha az alkalmazásban LB-re van állítva (vagy fordítva)	Az egység alkalmazásban történő beállítása után a felhasználó nem csatlakozik a mérleghez a szinkronizáláshoz.	Ha az egység megváltozik az alkalmazásban, amikor az eszköz nincs csatlakoztatva, az eszköz egysége nem fog szinkronizálódni, amíg legközelebb sikeresen csatlakozik az alkalmazáshoz. (Azaz, ha az eszköz le van választva az alkalmazásról, az eszköz egysége változatlan marad az alkalmazásban végrehajtott módosítások ellenére is.) Ezért ajánlott az egységet az alkalmazásban az eszköz csatlakoztatásával beállítani.

Bekapcsolási problémák

Váhu nie je možné zapnúť	Áramellátási problémák: A szigetelő fólia nincs eltávolítva, vagy az akkumulátor nincs aktiválva.	Törölje a szállítási módot, nyomja meg a gombot
	Nyomásérzékelő probléma: A terhelt nyomás nem éri el a minimális mérési tartományt (>5 kg).	A mérleg csak akkor kapcsol be, ha a terhelt nyomás eléri a minimális tartományt.

Töltési problémák

A mérleg nem tölthető	Nem megfelelő töltőt használnak.	Javasoljuk, hogy 5 V, 1 A vagy 5 V specifikációjú töltőt használjon, és 1 A-nál nagyobb áramerősségű, például 5 V, 2 A töltő általában visszafelé kompatibilis. Ez azt jelenti, hogy az 5 V-os, 2 A-es töltő kompatibilis egy 5 V-os, 1 A-es töltővel. Ha azonban a töltő bemenete nem 5 V, például 10 V, akkor ez a töltő nem használható..
	A mellékelt töltőkábel nincs használva.	A rossz minőségű vagy túl hosszú kábelek befolyásolhatják a töltést, vagy a töltés sikertelenségét okozhatják. Javasoljuk, hogy a mellékelt töltőkábelt használja.

FCC NYILATKOZAT

FCC figyelmeztetés:

Bármilyen változtatás vagy módosítás, amelyet a megfelelőségért felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá, érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére..

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működés e két feltételhez kötött

- (1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát és
- (2) ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve a nem kívánt működést

Jegyzet: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági telepítés során. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő és sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítés interferenciamentes lesz. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvetélben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználót arra biztatjuk, hogy próbálja meg kijavítani az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több segítségével:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
- Csatlakoztassa a készüléket egy másik áramkörhöz, mint amelyhez a vevő csatlakozik.
- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől.

A készüléket úgy értékelték, hogy megfelel a nagyfrekvenciás sugárzásnak való kitettség általános követelményeinek. A készülék hordozható állapotban korlátozás nélkül használható.



Prolinx GmbH
Brehmstr. 56, 40239 Duesseldorf Germany
Telefon: 0049 211 3105 4698
Email: eu@eulinx.eu



Prolinx Global LTD
27 Old Gloucester Street London, WC1N
3AX, UK Telefon: 0044 20 39661193
Email: eu@eulinx.eu

www.lepulsefit.com

seivice@lepulsefit.com

